



novafon®



NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany
support@novafon.de, www.novafon.com



2500066-99_V01 – Stand: 09/2025

Reha-Set one


Gebrauchsanweisung

User Manual


①



②

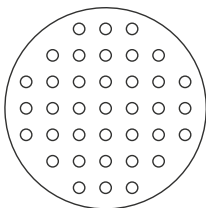

③

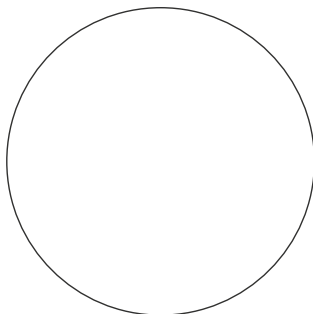

Deutsch

1. Vorwort	3
2. Lieferumfang	3
3. Anwendung	3
3.1 Zweckbestimmung	4
3.2 Anwendungsbeispiele	4
4. Wichtige Hinweise	6
5. Materialinformation	6
6. Haltbarkeit	7
7. Reinigung und Desinfektion	7
8. Gegenanzeigen/ Nebenwirkungen	8
9. CE-Konformität	9
10. Kontakt	9

1. Vorwort

Die Aufsätze des „Reha-Set one“ von novafon dienen als Erweiterung zu den bestehenden und im Lieferumfang enthaltenen Aufsätzen der novafon Schallwellengeräte zur Lokalen Vibrationstherapie. Sie sind ausschließlich für die Anwendung in Verbindung mit einem solchen Gerät vorgesehen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Seiten aufmerksam durch, um eine sachgemäße Anwendung zu garantieren.

2. Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind ein Kegelaufsatz one (1), ein Igelauufsatz one (2), ein Telleraufsatz XL one (3) und eine Gebrauchsanweisung. Das Reha-Set one ist erhältlich in Weiß oder Schwarz (Art.nr. 7016-040 / 7016-007).

3. Anwendung

Die Aufsätze werden durch eine Steckverbindung am Gerät fixiert. Die Aufsätze lassen sich durch eine Viertel-Umdrehung und leichten Zug einfach vom Gerät lösen. Aufgebracht werden die Aufsätze durch einfaches Stecken. Die Aufsätze haben ihre vorgesehene Position erreicht wenn die Halterungen an Gerät und Aufsatz nahtlos aufeinander liegen. Die Magnete helfen Ihnen die Endposition zu finden. Achten Sie vor Behandlungsbeginn darauf, dass der jeweilige Aufsatz in der vorgesehenen Endposition eingerastet ist.

Hinweis: Alle Aufsätze sind sowohl direkt auf der Haut als auch durch Textilien anwendbar. Es wird kein Gel o.ä. benötigt.

3.1 Zweckbestimmung

Geräte und Zubehör von novafon sind für die Linderung von Schmerzen und die Förderung der Muskelentspannung vorgesehen zur Linderung von Symptomen bei:

- Akuten Schmerzen des muskuloskelettalen Systems
- Chronischen Schmerzen des muskuloskelettalen Systems
- Neuro-Rehabilitation
- Stimm- und Schlucktherapie

3.2 Anwendungsbeispiele

Kegelaufsatz one	Igelaufsatz one	Telleraufsatz XL one
Präzise und punktuelle Behandlung auf Trigger- und Schmerzpunkten	Besonders stimulierender sensorischer Input	Großflächige Behandlung von Rücken und Oberschenkeln

Kegelaufsatz one	Igelaufsatz one	Telleraufsatz XL one
Präzises Mobilisieren von Gewebe, z.B. Narbengewebe	Kreisende Bewegungen zur Durchblutungsförderung	Wahrnehmungsförderung von Kopf bis Fuß
Behandlung feiner Strukturen im Gesicht, an den Händen und Füßen	Behandlung von Schmerzen am Kopf/Haaransatz durch bürstenähnliche Oberfläche	Ganzkörperbehandlung nach dem Sport

Hinweis: Die Vibrationstherapie lindert in erster Linie die Symptome, heilt jedoch nicht die Grunderkrankung. Die Verwendung des Reha-Sets ersetzt keinen Arztbesuch.

Hinweis: Die Anwendung der lokalen Vibrationstherapie zur Muskelentspannung bei neurologischen Erkrankungen oder der Stimm- und Schlucktherapie sollte nur von Fachpersonal (Therapeuten, Ärzten, Pflegepersonal) oder nach eingehender Einweisung durch eine solche Person durchgeführt werden. In allen Fällen wird die Lokale Vibrationstherapie als ein Element in einem ganzheitlichen Therapieplan eingesetzt, bei dem die Muskelentspannung für weitere Übungen und Trainingselemente benötigt wird. novafon Geräte können bei Personen ab 6 Jahren verwendet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden. Dasselbe kann für Menschen mit eingeschränkter kognitiver oder motorischer Kontrolle gelten (wie sie häufig bei Patienten mit Spastik auftreten). BEACHTEN SIE DIE KONTRAINDIKATIONEN in Kapitel 8 sowie die Anweisungen in Kapitel 4.

NICHT VERWENDEN zur Behandlung von Schmerzen oder Schwellungen unbekannter Herkunft. Wenden Sie sich in diesem Fall zur Klärung und Diagnose an einen Arzt.

4. Wichtige Hinweise

- Je nach Empfinden kann die Vibration als unterschiedlich intensiv wahrgenommen werden. Auf besonders empfindlichen Stellen behandeln Sie auf geringster Intensitätsstufe oder durch die Kleidung bzw. ein feines Tuch.
- Behandeln Sie maximal 20 Minuten pro Einheit und lassen das novafon Schallwellengerät danach für 15 Minuten abkühlen.
- Sollte sich Unwohlsein, Schwindel oder eine Verstärkung der Symptomatik einstellen, brechen Sie die Behandlung ab.
- Aufsätze für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie die Aufsätze nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden.
- Vermeiden Sie Stöße! Diese können die Produkte beschädigen und so zu einer Verletzungsgefahr führen.
- novafon Zubehöre sind nur zur Verwendung mit novafon Schallwellengeräten vorgesehen. Die Verwendung mit Produkten anderer Hersteller ist nicht zulässig.
- Bei der Verwendung dieser Aufsätze kann es zu einer anderen Geräuscentwicklung als bei den Standardaufsätzen kommen. Schalten Sie das Gerät daher erst ein, wenn Sie Körperkontakt hergestellt haben.
- Beachten Sie vor der Anwendung der Aufsätze auch alle Informationen aus der Gebrauchsanweisung Ihres novafon Schallwellengerätes.

5. Materialinformation

Die novafon Reha-Aufsätze sind aus einem hochwertigen und für medizinische Anwendungen geeigneten Kunststoff gefertigt. Bitte kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

6. Haltbarkeit

Die Haltbarkeit der Aufsätze kann je nach Häufigkeit des Gebrauches variieren. Überprüfen Sie die Aufsätze vor jeder Anwendung. Ersetzen Sie beschädigte oder verformte Produkte. Wir empfehlen den Austausch der Aufsätze nach maximal zwei Jahren Gebrauch. Bei häufiger Verwendung auch deutlich früher. Beachten Sie, dass Aufsätze als Verschleißteile gelten und daher einer eingeschränkten Gewährleistung unterliegen.

7. Reinigung und Desinfektion

Im professionellen und klinischen Gebrauch sind die novafon Aufsätze mit einem Mittel zur Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte vor und nach jeder Anwendung zu desinfizieren. Verwenden Sie für die Reinigung alkoholfreie Desinfektionsmittel, die sich für den Einsatz bei empfindlichen Oberflächen eignen wie z.B. novacleaner von novafon, SinAlc sensitiv von Himed oder Rheosept-WD plus Wipes von Rheosol. Wischen Sie ggf. mit einem weichen Tuch trocken nach. Bei Verschmutzung oder nach Bedarf reinigen Sie die Aufsätze mit Hilfe einer Bürste und eines Neutralreinigers unter fließendem Wasser vor der Desinfektion. Speziell für den Aufsatz „Igelauflauf“ empfehlen wir eine alkoholfreie Sprühdessinfektion. Für den häuslichen, nicht klinischen Gebrauch können Sie die Aufsätze mit einem feuchten Tuch, unter fließendem

Wasser oder in einer milden Seifenlauge reinigen. Lassen Sie die Aufsätze vollständig trocknen, bevor Sie diese wieder mit dem Gerät verwenden.

8. Gegenanzeigen/Nebenwirkungen

Behandlungen mit den novafon Schallwellengeräten sind nicht zulässig bei:

- Offenen Wunden / Ekzemen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Arteriosklerose (in der zu behandelnden Körperregion)
- Akutuellen Episoden von Epilepsie
- Schwangerschaft
- Implantaten (in der zu behandelnden Körperregion)
- Herzschrittmachern
- Thrombosen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Hirnschrittmachern
- Herzrhythmusstörungen
- Tumoren, kanzerös und nicht kanzerös
- Akuten entzündlichen Stellen (in der zu behandelnden Körperregion)
- Akuten Episoden entzündungsbedingter Krankheiten

Nebenwirkungen:

Bitte beachten Sie, dass es zu folgenden Nebenwirkungen kommen kann:

- Schmerzverstärkung/unangenehme Empfindung (gelegentlich)
- Unwohlsein/ Schwindel/ Unruhezustände (gelegentlich)
- Hautirritationen (selten)
- Blaue Flecke (sehr selten)
- Reflexe/ ungewollte Muskelkontraktionen (selten)

- Muskelkater (selten)

Bitte brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab, sollte sich eine dieser Nebenwirkungen einstellen. Bei anhaltenden Beschwerden kontaktieren Sie ihren Arzt. Beachten Sie, dass gerade bei der Schmerzbehandlung eine Erstverschlimmerung der Beschwerden eintreten kann, bevor Sie eine Verbesserung feststellen. Bitte beachten Sie, dass eine leichte Hautrötung und -erwärmung kein Grund zur Besorgnis darstellt. Dies ist ein gewünschter Effekt der Lokalen Vibrationstherapie, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht.

9. CE-Konformität

Für dieses Produkt erklärt der Hersteller Konformität mit den Anforderungen an Medizinprodukte der Klasse I gemäß der Verordnung 2017/745/EU sowie UK MDR 2002 in alleiniger Verantwortung. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls Sie den Verdacht haben, dass das Produkt einen schwerwiegenden Vorfall verursacht hat. Als Nutzer haben Sie das Recht, einen solchen Vorfall der zuständigen nationalen Behörde zu melden (z.B. Gesundheitsministerium).

10. Kontakt

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.

English

1. Preface	10
2. Scope of delivery	10
3. Applications & use	10
3.1. Intended use	11
3.2. Typical applications	11
4. Important instructions	12
5. Material information	13
6. Product Life	13
7. Cleaning and disinfection	14
8. Contraindications / side effects	14
9. CE Conformity	15
10. Contact	16

1. Preface

The attachments of the novafon ‘Reha Set one’ are designed as an extension to the existing attachments supplied with the novafon sound wave devices for local vibration therapy. They are intended solely for use in conjunction with such a device. Please read the following pages carefully to ensure proper use.

2. Scope of delivery

The scope of delivery includes a cone attachment one, a pin attachment one, a disc attachment XL one and instructions for use. The Rehabilitation Set one is available in white or black (item no. 7016-040 / 7016-007)

3. Applications & use

The attachments are fixed to the device via a plug connection. The attachments can easily be detached by turning them a quarter turn and pulling them gently off the device. The attachments click simply onto the device. The attachments have in the correct position when the brackets on the device and the attachment lie seamlessly on top of each other. The magnets help you to find the final position. Before starting treatment, make sure that the respective attachment is engaged in the intended final position.

Note: The attachments can be used directly on the skin or through fabric/clothing. There is no need for gel or similar.

3.1. Intended use

- novafon devices and accessories are designed to relieve pains and aid in relaxation of muscles to alleviate symptoms of:
- Temporary and transient pain of the musculoskeletal system
 - Chronical pain of the musculoskeletal system
 - Neuro Rehabilitation (sensorimotor disorders)
 - Voice and swallowing disorders

3.2. Typical applications

Cone attachment one	Pin attachment one	Disk attachment XL one
Targeted treatment for trigger and pain points	Slow movements for additional sensory input	Large area treatment, e.g. , back and thighs

Cone attachment one	Pin attachment one	Disk attachment XL one
Precise targeting of tissue such as scar tissue	Rotational movements to promote circulation	Sensory training from head to toe
Treatment of fine structures on the face, hands and feet	Treatment of pain on the head/hairline via brush-like surface	Full body treatment after exercise

Note: Vibration therapy primarily relieves symptoms, but does not cure the underlying disease. The use of the Rehabilitation Set does not replace a visit to the doctor.

Note: The use of local vibration therapy for muscle relaxation in neurological diseases or voice and swallowing therapy should only be carried out by specialists (therapists, physicians, nurses) or after detailed instruction by such a person.

In all cases Local Vibration Therapy is used as one element in a wholistic therapy plan where muscle relaxation is needed for further exercises and training elements. novafon devices can be used on people from the age of 6. Children need to be supervised. The same may apply to people with limited cognition or motor control (as often found in patients with spasticity). MIND THE CONTRAINDICATIONS as named in chapter 8 as well as the instructions in chapter 4.

DO NOT USE for treating pains or swellings of unknown origin. In that case consult a medical professional for clarification and diagnosis.

4. Important instructions

- Depending on personal sensitivity, the vibration can be perceived with different intensity. Treat particularly sensitive spots at the lowest intensity level, through clothing or a fine cloth.
- Treat a maximum of 20 minutes per unit, then let the novafon sound wave device cool down for 15 minutes.
- In case of discomfort, dizziness, or an increase in the symptoms, stop the treatment.
- Keep attachments out of reach of children.
- Do not use the attachments on mucous membranes and open wounds.
- Avoid impacts! These can damage the products and hence lead to a risk of injury.
- novafon accessories are only intended for use with novafon vibration sound wave devices. Use with products from other manufacturers is not permitted.
- When using these attachments, the noise generated may differ from that of the standard attachments. Do not switch on the device until you have made physical contact.
- Before using the attachments, please also observe all information from the operating instructions of your novafon sound wave device.

5. Material information

The novafon rehabilitation attachments are made of high-quality plastic suitable for medical applications. Please store in a cool, dry place away from sunlight.

6. Product Life

The product life of the attachments will vary depending on the frequency of use. Check the attachments before each application. Replace damaged or deformed products. We recommend replacing the attachments after two years of use. Even much sooner if used frequently. Please note that attachments are considered wear parts and are therefore subject to a limited warranty.

7. Cleaning and disinfection

For professional and clinical use, novafon attachments must be disinfected with a surface disinfectant for medical devices before and after each application. For cleaning, please use alcohol-free disinfectants that are suitable for use on sensitive areas, such as novacleaner from novafon, SinAlc sensitiv from Himed or Rheosept-WD plus Wipes from Rheosol. If necessary, wipe it dry with a soft cloth. In case of dirt or if otherwise necessary, clean the attachments with a brush and a neutral cleaner under running water before disinfecting. Especially for the pin-attachment, we recommend an alcohol-free disinfectant spray. For domestic, non-clinical use, clean the attachments with a damp cloth, under running water or in a mild soapy solution. Allow the attachments to dry completely before using them with the appliance again.

8. Contraindications/side effects

Treatments with the novafon sound wave devices are not permitted for patients with:

- Open wounds/eczema (in the body region to be treated)

- Arteriosclerosis (in the body region being treated)
- Current episodes of epilepsy
- Pregnancy
- Implants (in the body region being treated)
- Heart pacemakers
- Thromboses (in the body region being treated)
- Brain pacemakers
- Cardiac arrhythmia
- Tumours, cancerous and not cancerous
- Acute inflammations (in the body region being treated)
- Acute episodes of inflammatory diseases

Side effects:

Please note that the following side effects may occur:

- Increased pain/unpleasant sensation (occasionally)
- Discomfort/dizziness/restlessness (occasionally)
- Skin irritation (rarely)
- Bruises (very rarely)
- Reflexes/involuntary muscle contractions (rarely)
- Muscle soreness (rarely)

Please discontinue the treatment immediately, if you experience any of these side effects. If symptoms persist, please consult a doctor. Please note that pain treatment in particular can lead to an initial worsening of the symptoms before you notice any improvement. Please note that slight reddening and warming is not a cause for concern. This is a desired effect of local vibration therapy, which is caused by the increased blood flow.

9. CE Conformity

The manufacturer declares conformity with the requirements in respect to medical devices of class I according to Regulation 2017/745/EU and UK MDR 2002 in sole responsibility for this product. Please contact us in case you suspect the device to have caused a serious incident. As a user you have the right to report such an incident to your national competent authority (e.g Ministry of health; FDA).

10. Contact

If you have any questions, please contact your local dealer or the manufacturer.

Italiano

1. Premessa	16
2. Dotazione	16
3. Uso	16
3.1 Uso previsto	17
3.2 Esempi di applicazione tipici	17
4. Indicazioni importanti	18
5. Informazioni sui materiali	19
6. Durata	19
7. Pulizia E Disinfezione	20
8. Controindicazioni / Effetti collaterali	20
9. Conformità CE	21
10. Contatto	22

1. Premessa

Le testine del riabilitazione "Reha-Set one" di novafon rappresentano un ampliamento delle testine già esistenti e contenute nel volume di fornitura degli apparecchi a onde sonore novafon per terapia a vibrazione locale. Sono previste esclusivamente per l'utilizzo in abbinamento a un tale apparecchio. Si raccomanda di leggere attentamente le seguenti pagine per garantire un uso adeguato.

2. Dotazione

La dotazione comprende una testina conica one, una testina a spazzola one, una testina a disco XL one e le istruzioni per l'uso. Gli accessori per riabilitazione sono disponibili nei colori bianco e nero (Art. nr. 7016-040 / 7016-007).

3. Uso

Le testine sono fissate all'apparecchio ad innesto. Le testine si staccano facilmente dall'apparecchio ruotandole per un quarto di giro e tirando leggermente. Le testine sono applicate con un semplice innesto. Le testine hanno raggiunto la loro posizione prevista quando i supporti sull'apparecchio e la testina sono sovrapposti senza gioco. I magneti aiutano a trovare la posizione finale. Prima di iniziare il trattamento assicurarsi che la rispettiva testina sia inserita nella posizione finale prevista. Indicazioni: Tutte le testine possono essere applicate sia direttamente sulla pelle che attraverso tessuti.

3.1. Uso previsto

Gli apparecchi e gli accessori di novafon sono destinati ad attenuare il dolore e a favorire il rilassamento muscolare per alleviare i sintomi nei seguenti casi:

- Dolori acuti a carico del sistema muscolo-scheletrico
- Dolori cronici a carico del sistema muscolo-scheletrico
- Neuroriabilitazione
- Terapia per la voce e la deglutizione

3.2. Esempi di applicazione tipici

Testina conica one	Testina a spazzola one	Testina a disco XL one
Trattamento punto per punto su punti trigger/del dolore	Input sensoriale particolare	Trattamento di superfici grandi di schiena e cosce

Testina conica one	Testina a spazzola one	Testina a disco XL one
Spostamento preciso di strati di tessuto e tessuto cicatriziale	Movimenti circolari per favorire l'irrorazione sanguigna	Miglioramento della percezione dalla testa ai piedi
Trattamento di strutture fini su viso, mani e piedi	Trattamento di dolori a testa / attaccatura dei capelli grazie alla superficie simile a una spazzola	Trattamento di tutto il corpo dopo attività sportiva

Nota: La terapia vibratoria allevia principalmente i sintomi, ma non cura la patologia di base. L'utilizzo del "set reha" non sostituisce una visita medica.

Nota: L'uso della terapia vibratoria locale per il rilassamento muscolare nelle malattie neurologiche o la terapia della voce e della deglutizione deve essere eseguita solo da personale qualificato (terapisti, medici, personale infermieristico) o dopo istruzioni dettagliate da parte di tale persona. In tutti i casi, la terapia vibratoria locale viene utilizzata come elemento in un piano di terapia olistica in cui è richiesto il rilassamento muscolare per ulteriori esercizi ed elementi di allenamento. I dispositivi novafon possono essere utilizzati da persone dai 6 anni in su. I bambini devono essere sorvegliati. Lo stesso può valere per le persone con alterato controllo cognitivo o motorio (come spesso accade nei pazienti con spasticità). RISPETTARE LE CONTROINDICAZIONI nel Capitolo 8 e le istruzioni nel Capitolo 4.

NON UTILIZZARE per trattare dolore o gonfiore di origine sconosciuta. In questo

caso, contattare un medico per chiarimenti e diagnosi.

4. Indicazioni importanti

- A seconda della sensibilità, è possibile che la vibrazione venga percepita di intensità diversa. I punti particolarmente sensibili vanno trattati con il livello di intensità più basso oppure frapponendo gli indumenti o un panno sottile.
- Utilizzare per non più di 20 minuti per unità e poi lasciar raffreddare l'apparecchio a onde sonore novafon per 15 minuti.
- Qualora compaiano sensazione di malessere, vertigini o un aumento della sintomatologia, interrompere il trattamento.
- Conservare le testine fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare le testine su mucose e ferite aperte.
- Evitare gli urti! Questi possono danneggiare i prodotti e causare un pericolo di lesioni.
- Gli accessori novafon sono destinati esclusivamente all'uso con i dispositivi a onde sonore novafon. Non è consentito l'uso con prodotti di altri produttori.
- Quando si utilizzano questi accessori, il rumore generato può differire da quello degli accessori standard. Non accendere il dispositivo finché non si è stabilito un contatto fisico.
- Si prega di osservare tutte le informazioni contenute nelle istruzioni d'uso dell'apparecchio a onde sonore novafon prima di utilizzare le testine.

5. Informazioni sui materiali

Le testine di riabilitazione novafon sono realizzate con una plastica di alta qualità per le applicazioni in medicina. Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dalla luce.

6. Durata

La durata delle testine può variare a seconda della frequenza dell'utilizzo. Controllare le testine prima di ogni utilizzo. Sostituire prodotti danneggiati o deformati. Si raccomanda di sostituire le testine dopo due anni di utilizzo. In caso di uso più frequente, anche molto prima. Si noti che gli accessori sono considerati parti di consumo e sono quindi coperti da una garanzia limitata. Lasciare asciugare completamente le testine prima di utilizzarle nuovamente con l'apparecchio.

7. Pulizia E Disinfezione

Nell'uso professionale e clinico, le testine novafon devono essere disinfettate prima e dopo ogni utilizzo mediante un disinfettante per superfici di dispositivi medici. Per la pulizia, utilizzare disinfettanti senza alcool adatti all'uso su superfici delicate, come novacleaner di novafon, SinAlc sensitiv di Himed o Rheosept-WD plus Wipes di Rheosol. Eventualmente asciugare con un panno morbido. Per la "testina a spazzola" si raccomanda una disinfezione a spruzzo senza alcool, ad esempio SinAlc Sensitive di Himed o un prodotto analogo per la disinfezione di superfici di prodotti medici. In caso di imbrattamento o secondo necessità, prima della disinfezione, pulire le testine con l'ausilio di una spazzola e di un detergente neutro sotto acqua corrente. Per l'uso domestico, non clinico è possibile pulire

le testine con un panno umido sotto acqua corrente o con un disinfettante domestico.

8. Controindicazioni / Effetti collaterali

I trattamenti con gli apparecchi a onde sonore novafon non sono consentiti nei casi seguenti:

- Ferite aperte/eczemi (nella regione del corpo da trattare)
- Arteriosclerosi (nella regione da trattare)
- Episodi attuali di epilessia
- Gravidanza
- Impianti (nella regione da trattare)
- Pacemaker
- Trombosi (nella regione da trattare)
- Pacemaker cerebrali
- Aritmie cardiache
- Tumori, cancerose e non cancerose
- Punti infiammati acuti (nella regione da trattare)
- Episodi acuti di patologie dovuti a infiammazioni

Effetti collaterali:

Si prega di notare che potrebbero verificarsi i seguenti effetti collaterali:

- Aumento del dolore/sensazione spiacevole (occasionalmente)
- Disagio/vertigini/irrequietezza (occasionalmente)
- Irritazione cutanea (raramente)
- Ematomi (molto raramente)
- Riflessi/contrazioni muscolari involontarie (raramente)
- Dolori muscolari (raramente)

Interrompere immediatamente il trattamento se dovesse presentarsi uno degli effetti

collaterali di cui sopra. Se i sintomi persistono, consultare un medico. Tenere presente che proprio nel trattamento del dolore può verificarsi inizialmente un peggioramento dei disturbi, prima di riscontrare un miglioramento. Si noti che un leggero arrossamento o riscaldamento cutaneo non devono destare preoccupazione. Si tratta di un effetto desiderato della terapia di vibrazioni locale, che si crea a causa della maggiore irradiazione sanguigna.

9. Conformità CE

Per questo prodotto il produttore dichiara la conformità con i requisiti dei prodotti medicali di classe I secondo il Regolamento 2017/745/UE e il UK MDR 2002 a propria esclusiva responsabilità. In caso di sospetto che il dispositivo abbia causato un grave incidente, siete pregati di contattarci. In qualità di utenti avete il diritto di segnalare tale incidente all'autorità nazionale competente (ad esempio Ministero della salute).

10. Contatto

Per chiarimenti rivolgersi al proprio fornitore o produttore.

Français

1. Préambule	24
2. Contenu de la livraison	24
3. Utilisation	24
3.1 Utilisation prévue	25
3.2 Exemples d'application typiques	25
4. Remarques importantes	27
5. Informations sur le matériau	28
6. Durée de vie	28
7. Nettoyage et désinfection	28
8. Contre-indications/ Effets secondaires	29
9. Conformité CE	30
10. Contact	30

1. Préambule

Les embouts de la série « Reha Set one » de novafon permettent d'élargir la gamme existante d'embouts pour les appareils à infrasons novafon pour la thérapie locale par vibrations. Ils sont prévus exclusivement pour une utilisation en rapport avec un appareil de ce type. Veuillez lire attentivement les pages qui suivent pour garantir une utilisation adéquate.

2. Contenu de la livraison

Sont fournis à la livraison un embout conique one, un embout hérissone one, un embout de plaque XL one et un mode d'emploi. Les embouts Reha one sont disponibles en blanc et en noir (réf. 7016-040/7016-007).

3. Utilisation

Les embouts sont fixés à l'appareil à l'aide d'un raccord enfichable. Pour retirer les embouts de l'appareil, il suffit de les tourner d'un quart de tour et de les tirer légèrement. Pour les monter, il suffit de les insérer. Les embouts atteignent la position idéale lorsque les supports situés sur l'appareil et l'embout sont parfaitement posés les uns sur les autres. Les aimants aident à trouver la position finale. Avant de commencer le traitement, assurez-vous que l'embout utilisé est bien placé en position finale idéale.

Remarque : Tous les embouts peuvent être utilisés directement sur la peau, mais également au travers de textiles. Aucun gel ou autre n'est nécessaire.

3.1 Utilisation prévue

L'appareil et les accessoires de novafon sont étudiés pour soulager les douleurs et pour aider les muscles à se détendre ainsi que pour soulager les symptômes en cas de :

- douleurs aiguës au niveau du système musculo-squelettique
- douleurs chroniques au niveau du système musculo-squelettique
- neuroréhabilitation
- thérapie des troubles de la voix et de la déglutition

3.2 Exemples d'application typiques

Embout conique one	Embout hérissone	Plaque à infra-sons XL one
Traitement ponctuel sur les points trigger et les points de douleur	Entrée particulièrement sensorielle	Traitement étendu du dos et des cuisses
Déplacement précis de couches tissulaires et de tissus cicatriciels	Mouvements circulaires pour stimuler la circulation sanguine	Stimulation de la perception de la tête aux pieds
Traitement de structures fines au niveau du visage, des pieds et des mains	Traitement de douleurs à la tête/à la racine des cheveux grâce à la surface type brosse	Traitement du corps entier après des séances de sport

Remarque : La thérapie par vibration soulage principalement les symptômes, mais ne guérit pas la maladie sous-jacente. L'utilisation du série Reha ne remplace pas une visite chez le médecin.

Remarque : L'utilisation de la thérapie par vibration locale pour la relaxation musculaire dans les maladies neurologiques ou la thérapie de la voix et de la déglutition ne doit être effectuée que par du personnel qualifié (thérapeutes, médecins, personnel infirmier) ou après avoir reçu des instructions détaillées d'une telle personne.

Dans tous les cas, la thérapie par vibration locale est utilisée comme élément d'un plan de thérapie holistique dans lequel la relaxation musculaire est nécessaire pour d'autres exercices et éléments d'entraînement. Les appa-

reils novafon peuvent être utilisés par des personnes de 6 ans et plus. Les enfants doivent être surveillés. La même chose peut s'appliquer aux personnes ayant une altération du contrôle cognitif ou moteur (comme cela se produit souvent chez les patients atteints de spasticité). OBSERVER LES CONTRE-INDICATIONS du chapitre 8 et les instructions du chapitre 4. NE PAS UTILISER pour traiter la douleur ou l'enflure d'origine inconnue. Dans ce cas, contactez un médecin pour obtenir des éclaircissements et un diagnostic.

4. Remarques importantes

- Selon le ressenti, les vibrations peuvent être ressenties de façon plus ou moins intense. Au niveau des points particulièrement sensibles, traitez avec le plus petit niveau d'intensité ou bien à travers les vêtements ou un tissu fin.
- Traitez pendant maximum 20 minutes par unité et laissez ensuite l'appareil à infrasons novafon refroidir pendant 15 minutes.
- En cas de malaise, d'étourdissement ou d'amplification des symptômes, arrêtez immédiatement le traitement.
- Conservez les embouts hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas les embouts sur les muqueuses ou sur des plaies ouvertes.
- Évitez les coups ! Ils peuvent endommager les produits et provoquer un risque de blessure.
- Les accessoires novafon sont uniquement destinés à être utilisés avec les appareils à ondes sonores novafon. L'utilisation avec des produits d'autres fabricants n'est pas autorisée.

- Lors de l'utilisation de ces accessoires, le bruit généré peut différer de celui des accessoires standards. N'allumez pas l'appareil avant d'avoir établi un contact physique.
- Avant d'utiliser les embouts, veuillez également respecter toutes les informations issues du manuel d'utilisation de votre appareil à ondes sonores novafon.

5. Informations sur le matériel

Les embouts Reha de novafon sont fabriqués dans un plastique de qualité adapté aux applications médicales. À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

6. Durée de vie

La durée de vie des embouts peut varier selon la fréquence d'utilisation. Vérifiez les embouts avant chaque utilisation. Remplacez les produits endommagés ou déformés. Nous vous recommandons de remplacer les embouts après deux ans d'utilisation. En cas d'utilisation plus fréquente, également bien plus tôt. Notez que les accessoires sont considérés comme des pièces consommables et sont donc soumis à une garantie limitée. Laissez les embouts sécher complètement avant de les réutiliser avec l'appareil.

7. Nettoyage et désinfection

En usage professionnel et clinique, les embouts novafon doivent être désinfectés avec un désinfectant de surface pour dispositifs médicaux avant et après chaque utilisation. Pour le nettoyage, utilisez des désinfectants sans alcool adaptés aux surfaces sensibles, tels que le novacleaner de novafon, le SinAlc Sensitiv de Himed ou les lingettes Rheo-

sept-WD plus de Rheosol. Essayez ensuite le cas échéant avec un chiffon doux. En particulier pour l'embout « hérisson », nous vous recommandons un spray désinfectant sans alcool, par ex. SinAlc Sensitive de Himed ou un produit analogue pour la désinfection de surface des dispositifs médicaux. En cas de salissure ou si besoin, nettoyez les embouts à l'aide d'une brosse et d'un détergent neutre à l'eau courante avant la désinfection. Pour l'usage domestique, non clinique, vous pouvez nettoyer les embouts à l'aide d'un chiffon humide, à l'eau courante ou à l'eau légèrement savonneuse. légèrement savonneuse.

8. Contre-indications/ Effets secondaires

Les traitements avec les appareils à infrasons novafon ne sont pas autorisés en cas de :

- Plaies ouvertes/eczémas (dans la zone corporelle à traiter)
- Athérosclérose (dans la zone corporelle à traiter)
- Épisodes récents d'épilepsie
- Grossesse
- Implants (dans la zone corporelle à traiter)
- Stimulateurs cardiaques
- Thromboses (dans la zone corporelle à traiter)
- Stimulateurs cérébraux
- Troubles du rythme cardiaque
- Tumeurs, cancéreux et non cancéreux
- Zones inflammatoires aiguës (dans la zone corporelle à traiter)
- Épisodes aigus de maladies inflammatoires

Effets secondaires : Veuillez noter que les effets secondaires suivants peuvent survenir :

- Augmentation de la douleur/sensation désagréable (occasionnellement)
- Inconfort/vertiges/agitation (occasionnellement)
- Irritation cutanée (rarement)
- Ecchymoses (très rarement)
- Réflexes/contractions musculaires involontaires (rarement)
- Douleurs musculaires (rarement)

Interrompez immédiatement le traitement en cas d'apparition de l'un de ces effets secondaires. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Veuillez noter que le traitement de la douleur, en particulier, peut entraîner une aggravation initiale des symptômes avant que vous ne remarquiez une amélioration. Veuillez noter qu'une légère rougeur ou un léger échauffement de la peau n'est pas un motif d'inquiétude. Il s'agit d'un effet recherché de la thérapie locale par vibrations, qui résulte d'une augmentation de la circulation sanguine.

9. Conformité CE

Pour ce produit, le fabricant déclare sous sa propre responsabilité la conformité avec les exigences relatives aux dispositifs médicaux de classe I conformément au Règlement 2017/745/UE et UK MDR 2002. Veuillez nous contacter si vous pensez que l'appareil est à l'origine d'un incident grave. En tant qu'utilisateur, vous avez le droit de signaler un tel incident à votre autorité nationale compétente (par ex., le ministère de la santé ou l'ANSM).

10. Contact

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant.

Español

1. Prefacio	31
2. Volumen de suministro	31
3. Aplicación	32
3.1 Uso Previsto	32
3.2 Ejemplos de aplicaciones típicas	33
4. Indicaciones importantes	34
5. Información de Materiales	35
6. Durabilidad	35
7. Limpieza y desinfección	35
8. Contraindicaciones/ efectos secundarios	36
9. Conformidad CE	37
10. Contacto	38

1. Prefacio

Los cabezales pertenecientes al set "Reha Set one" de novafon, son una ampliación de los cabezales existentes e incluidos en el volumen de suministro de los aparatos de ondas sonoras de novafon para la terapia de vibración local. Estos componentes están previstos exclusivamente para su uso con este tipo de aparatos. Lea con atención las siguientes páginas para garantizar un uso adecuado.

2. Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye un cabezal esférico one, un cabezal tipo erizo one, una placa sónica XL one y unas instrucciones de uso. Los accesorios de rehabilitación (Reha one) están disponibles en blanco y negro (n.º art. 7016-040 / 7016-007).

3. Aplicación

Los cabezales se fijan en el aparato mediante una conexión de enchufe. Los cabezales se pueden soltar fácilmente del aparato con un cuarto de vuelta y ejerciendo un ligero tirón. Para colocarlos, simplemente hay que insertarlos. Los cabezales han alcanzado su posición prevista cuando los soportes del aparato y del cabezal se encuentran uno encima del otro. Los imanes le ayudan a encontrar la posición final. Antes de iniciar el tratamiento, asegúrese de que el cabezal correspondiente ha encajado en su posición final prevista.

Nota: Todos los cabezales pueden aplicarse directamente en la piel o a través de tejidos. No se necesita ningún gel ni productos similares.

3.1 Uso Previsto

Los dispositivos y accesorios de novafon están diseñados para aliviar el dolor y favorecer la relajación muscular a fin de aliviar los síntomas de:

- dolores agudos del sistema musculoesquelético
- dolores crónicos del sistema musculoesquelético
- neurorrehabilitación
- terapia del habla y la deglución

3.2 Ejemplos de aplicaciones típicas

Cabezal esférico one	Cabezal tipo erizo one	Placa sónica XL one
Tratamiento puntual en puntos de activación y puntos dolorosos	Aportación sensorial	Tratamiento con superficie amplia de la espalda y los muslos
Desplazamiento preciso de capas de tejidos y tejido cicatricial	Movimientos circulares para activar el riego sanguíneo	Fomento de la percepción de la cabeza a los pies
Tratamiento de estructuras finas del rostro, de las manos y de los pies	Tratamiento de dolores en la cabeza/nacimiento del cabello con su superficie tipo cerdas de cepillo	Tratamiento de todo el cuerpo tras hacer deporte

Nota: La terapia de vibración alivia principalmente los síntomas, pero no cura la enfermedad subyacente. El uso del equipo “Reha-Set one” no reemplaza una visita al médico.

Nota: El uso de la terapia de vibración local para la relajación muscular en enfermedades neurológicas o la terapia de la voz y la de-

glución solo debe ser realizado por personal calificado (terapeutas, médicos, personal de enfermería) o después de instrucciones detalladas de dicha persona.

En todos los casos, la terapia de vibración local se utiliza como un elemento en un plan de terapia holística en el que se requiere relajación muscular para ejercicios y elementos de entrenamiento adicionales. Los dispositivos novafon pueden ser utilizados por personas mayores de 6 años. Los niños deben ser supervisados. Lo mismo puede aplicarse a personas con deterioro del control cognitivo o motor (como ocurre a menudo en pacientes con espasticidad). **OBSERVE LAS CONTRAINDICACIONES del Capítulo 8 y las instrucciones del Capítulo 4.**

NO USE para tratar el dolor o la hinchazón de origen desconocido. En este caso, comuníquese con un médico para obtener una aclaración y un diagnóstico.

4. Indicaciones importantes

- Según la sensibilidad, la vibración puede percibirse en distintos grados de intensidad. En puntos especialmente sensibles, aplique el nivel de intensidad más bajo o realice el tratamiento a través de la ropa o de un tejido fino.
- Trate cada zona un máximo de 20 minutos y, a continuación, deje que el aparato de ondas sonoras de novafon se enfríe durante 15 minutos.
- Si se producen molestias o mareos o se intensifican los síntomas, interrumpa el tratamiento.
- Mantenga los cabezales fuera del alcance de los niños.

- No utilice los cabezales en mucosas ni heridas abiertas.
- ¡Evite los golpes! De lo contrario, el producto podría sufrir daños y provocar un peligro de lesiones.
- Los accesorios novafon solo están diseñados para su uso con dispositivos de ondas sonoras novafon. No se permite el uso con productos de otros fabricantes.
- Al utilizar estos accesorios, el ruido generado puede diferir del de los accesorios estándar. No encienda el dispositivo hasta que haya hecho contacto físico.
- Antes de utilizar los cabezales, tenga también en cuenta la información del manual de uso del aparato de ondas sonoras de novafon.

5. Información de Materiales

Los cabezales “Reha-Set one” de novafon están fabricados en un plástico de alta calidad indicado para uso médico. Guarde el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

6. Durabilidad

La durabilidad de los cabezales puede variar dependiendo de la frecuencia de uso. Compruebe los cabezales antes de cada uso, y sustituya los productos dañados o deformados. Se recomienda sustituir los cabezales después de dos años de uso. Si se utiliza de forma frecuente, mucho antes. Tenga en cuenta que los accesorios se consideran piezas de desgaste y, por lo tanto, están sujetos a una garantía limitada. Deje que los accesorios se sequen completamente antes de volver a utilizarlos con el aparato.

7. Limpieza y desinfección

Para su aplicación en un entorno profesional y clínico, los cabezales novafon deben desinfectarse con un producto desinfectante previsto para las superficies de productos sanitarios antes y después de cada uso. Limpie únicamente con desinfectantes sin alcohol, aptos para superficies sensibles como, por ejemplo, novacleaner de novafon, SinAlc sensitiv de Himed o Rheosept-WD plus Wipes de Rheosol. En caso necesario, frote las superficies con un paño suave para secarlas. Para el cabezal tipo erizo, recomendamos especialmente un desinfectante sin alcohol en spray, p. ej., SinAlc Sensitive de Himed, o un producto similar para la desinfección de superficies de productos sanitarios. En particular para el cabezal tipo erizo, recomendamos un desinfectante en spray sin alcohol. En caso de suciedad o si es necesario, antes de la desinfección, limpie los cabezales con ayuda de un cepillo y un producto de limpieza neutro bajo el agua corriente. Para su aplicación en un entorno doméstico y no clínico, pueden limpiarse los cabezales con un paño húmedo, bajo el agua corriente o con una lejía jabonosa suave.

8. Contraindicaciones/ efectos secundarios

No está permitido el tratamiento con los aparatos de ondas sonoras de novafon en los siguientes casos:

- Heridas abiertas/eccemas (en la región corporal que se vaya a tratar)
- Arterioesclerosis (en la región corporal que se vaya a tratar)

- Episodios actuales de epilepsia
- Embarazo
- Implantes (en la región corporal que se vaya a tratar)
- Marcapasos
- Trombosis (en la región corporal que se vaya a tratar)
- Marcapasos cerebral
- Arritmias cardíacas
- Tumores, canceroso y no canceroso
- Puntos de inflamación agudos (en la región corporal que se vaya a tratar)
- Episodios de enfermedades inflamatorias

Efectos secundarios:

Tenga en cuenta que pueden presentarse los siguientes efectos secundarios:

- Aumento del dolor/sensación desagradable (ocasionalmente)
- Malestar/mareos/inquietud (ocasionalmente)
- Irritación cutánea (raramente)
- Moretones (muy raramente)
- Contracciones musculares reflejas/involuntarias (raramente)
- Dolor muscular (raramente)

Por favor, interrumpa el tratamiento inmediatamente si presenta uno de estos efectos secundarios. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. Tenga en cuenta que precisamente en el tratamiento del dolor, es posible que se produzca un empeoramiento inicial de los síntomas antes de que note una mejoría. Tenga en cuenta que un ligero enrojecimiento de la piel o sensación de calor no son motivos de preocupación. Se trata de un efecto

deseado de la terapia de vibración local, resultante del aumento de riego sanguíneo.

9. Conformidad CE

El fabricante declara bajo su responsabilidad exclusiva la conformidad de este producto con los requisitos para los productos sanitarios de clase I según lo dispuesto por el Reglamento 2017/745/UE y el UK MDR 2002. Póngase en contacto con nosotros si sospecha que el aparato ha causado un incidente grave. Como usuario, tiene derecho a informar de un incidente de este tipo a la autoridad nacional competente (por ejemplo, el Ministerio de Sanidad).

10. Contacto

En caso de duda, contacte directamente con su distribuidor o con el fabricante.

Dansk

1. Forord	39
2. Leveringsomfang	39
3. Anvendelse	39
3.1 Tilsigtet Brug	40
3.2 Typiske eksempler på anvendelse	40
4. Vigtige Informationer	41
5. Materialeinformationer	42
6. Holdbarhed	42
7. Rengøring og desinfektion	43
8. Kontraindikationer / Bivirkninger	43
9. CE-Konformitet	44
10. Kontakt	45

1. Forord

Påsætningsdelene fra »Reha Set one« fra novafon bruges til supplement af de eksisterende påsætningsdele, som følger med ved køb af novafon-lydbølgeapparater til lokal vibrationsterapi. De er udelukkende beregnet til anvendelse i forbindelse med et sådant apparat. Læs de følgende sider omhyggeligt igennem, så korrekt anvendelse garanteres.

2. Leveringsomfang

Leveringen omfatter en kegle one, en pindsvin one, en lydtallerken XL one og en brugsanvisning. Reha-set one kan fås i vid og sort (art.nr. 7016-040 / 7016-007).

3. Anvendelse

Påsætningsdelene fastgøres på apparatet ved hjælp af en tilslutningsbøsning. Påsæt-

ningsdelene kan løsnes fra apparatet ved en kvart omdrejning og et let træk. Påsætningsdelene placeres på apparatet ved at sætte dem fast. Påsætningsdelene er sat korrekt på, hvis apparatet og påsætningsdelen er tæt forbundet. Magneterne hjælper dig med at finde slutpositionen. Vær ved starten af behandlingen opmærksom på, at påsætningsdelen er gået i hak i slutpositionen. Bemærk: Alle påsætningsdele kan anvendes direkte på huden og gennem tøjet. Der skal ikke bruges gel eller lignende.

3.1 Tilsigtet Brug

Apparaterne og tilbehøret fra novafon er tiltænkt smertelindring og øget muskelfaflapning samt lindring af symptomer ved:

- Akutte smerter i det muskuloskeletale system
- Kroniske smerter i det muskuloskeletale system
- Neurorehabilitering
- Stemme- og synkebehandling

3.2 Typiske eksempler på anvendelse

Kegle one	Pindsvin one	Lydtallerken XL one
Punktbehandling på trigger- og smertepunkter	Særlig sensorisk behandling	Behandling af store områder på ryggen og lårene
Præcis massage af vævslag og arvæv	Cirkulerende bevægelser til forbedret blodgennemstrømning	Forbedret kropsformemmelse fra top til tå
Behandling af fine strukturer i ansigtet, på hænderne og fødderne	Behandling af smerter på hovedet / hovedbunden med børstelignende overflade	Behandling af hele kroppen efter sport

Bemærk: Vibrationsterapi lindrer primært symptomer, men helbreder ikke den underliggende sygdom. Brugen af Reha-sættet erstatter ikke et besøg hos lægen.

Bemærk: Brug af lokal vibrationsterapi til muskellafslapning ved neurologiske sygdomme eller stemme- og synkebehandling bør kun udføres af kvalificeret personale (terapeuter, læger, plejepersonale) eller efter detaljeret instruktion af en sådan person.

I alle tilfælde bruges lokal vibrationsterapi som et element i en holistisk terapiplan, hvor muskellafslapning er påkrævet til yderligere øvelser og træningselementer. novafon-enheder kan bruges af personer i alderen 6 og derover. Børn skal være under opsyn. Det samme kan gælde for mennesker med nedsat kognitiv eller motorisk kontrol (som ofte forekommer hos patienter med spasticitet). OBSERVER KONTRAINDIKATIONERNE i kapitel 8 og instruktionerne i kapitel 4. BRUG IKKE til behandling af smerter eller hævelse af ukendt oprindelse. I dette tilfælde skal du kontakte en læge for afklaring og diagnose.

4. Vigtige Informationer

- Afhængigt af personens kropsfornemmelse kan vibrationerne opleves forskelligt. På særligt følsomme steder skal du behandle med det laveste intensitetsstrin eller gennem tøjet eller et tyndt stykke stof.
- Behandl maksimalt i 20 minutter pr. gang, og lad derefter novafon-lydbølgeapparatet afkøle i 15 minutter.

- Hvis du føler dig utilpas, svimmel, eller hvis symptomerne øges, skal behandlingen afbrydes.
- Opbevar påsætningsdelene, så de er utilgængelige for børn.
- Brug ikke påsætningsdelene på slimhinder og åbne sår.
- Undgå stød! Stød kan beskadige produkterne og dermed medføre risiko for kvæstelser.
- novafon-tilbehør er kun beregnet til brug sammen med novafon-lydbølgeenheder. Brug med produkter fra andre producenter er ikke tilladt.
- Når du bruger disse vedhæftede filer, kan den genererede støj afvige fra støj fra standardudstyret. Tænd ikke for enheden, før du har fået fysisk kontakt.
- Læs og overhold alle informationer i novafon-lydbølgeapparatets brugsanvisning, før påsætningsdelene anvendes.

5. Materialeinformationer

novafon "Reha-Set one" er lavet af plastik af høj kvalitet, der er særligt velegnet til medicinske formål. Opbevares køligt og tørt.

6. Holdbarhed

Påsætningsdelenes holdbarhed kan variere afhængigt af, hvor ofte de bruges. Kontrollér påsætningsdelene efter hver brug. Udskift produkter, der er beskadigede eller har mistet formen. Vi anbefaler udskiftning af påsætningsdelene efter to års brug. Skal opbevares køligt, tørt og beskyttet mod lys. Bemærk, at Påsætningsdelene betragtes som sliddele og derfor er omfattet af en begrænset garanti. Lad redskaberne tørre helt, før du bruger dem sammen med apparatet igen.

7. Rengøring og desinfektion

I den professionelle og kliniske anvendelse, bør novafon lydhovedet desinficeres før og efter hver anvendelse med et desinficeringsmiddel til overflader af medicinske apparater.

Ved rengøring skal der anvendes alkoholfrie desinfektionsmidler, der er velegnede til brug på følsomme overflader, herunder f.eks. novacleaner fra novafon, SinAlc sensitiv fra Himed eller Rheosept-WD plus Wipes fra Rheosol. Tør i givet fald efter med en blød klud. Til påsætningsdelen »pindsvin« anbefaler vi en antialkoholisk spraydesinfektion, fx SinAlc Sensitive fra Himed eller et lignende produkt til overfladedesinfektion af medicinske produkter. Hvis påsætningsdelene er snavsede og i øvrigt ved behov, skal de rengøres ved hjælp af en børste og et neutralt rengøringsmiddel under rindende vand før desinficeringen. Til hjemmebrug og ikke klinisk brug kan påsætningsdelene rengøres med en fugtig klud, under rindende vand eller med mildt sæbevand.

8. Kontraindikationer/Bivirkninger

Behandling med novafon-lydbølgeapparater er ikke tilladt ved:

- Åbne sår/eksem (i den kropsdel der behandles)
- Arteriosklerose (i den kropsdel der behandles)
- Aktuelle episoder med epilepsi
- Graviditet
- Implantater (i den kropsdel der behandles)
- Pacemakere
- Blodpropper (i den kropsdel der behandles)
- Hjernepacemakere

- Hjerterytmeforstyrrelser
- Svulster, kræft og ikke kræft
- Steder med akut betændelse (i den kropsdel der behandles)
- Akutte episoder med betændelsestilstande

Bivirkninger:

Bemærk venligst, at følgende bivirkninger kan forekomme:

- Øget smerte/ubehagelig fornemmelse (lejlighedsvis)
- Ubehag/svimmelhed/rastløshed (lejlighedsvis)
- Hudirritation (sjældent)
- Blå mærker (meget sjældent)
- Reflekser/ufrivillige muskelsammentrækninger (sjældent)
- Muskelømhed (sjældent)

Afbryd behandlingen omgående, hvis du oplever bivirkninger. Hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte en læge. Vær opmærksom på, at der især ved smertebehandlingen i første omgang kan opstå en forværring af smerterne, inden der opnås en bedring. Bemærk, at en let rødme eller opvarmning af huden ikke er grund til bekymring. Det er den ønskede effekt ved den lokale vibrationsterapi, som opstår på grund af øget blodgennemstrømning.

9. CE-Konformitet

For dette produkt erklærer producenten eneansvarligt overensstemmelse med kravene til medicinsk udstyr i klasse I i henhold til forordning 2017/745/EU og UK MDR 2002.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig direkte til din forhandler eller producenten